

Carestream

Sistema radiográfico portátil DRX-Revolution



INNOVACIÓN PORTÁTIL.

Movilidad redefinida.



LA POTENCIA DEL X-FACTOR

No lo parece ahora, pero las imágenes móviles han cambiado para siempre.

El DRX-Revolution, al igual que la familia DRX completa, ha sido diseñado sobre la destacada plataforma de detectores inalámbricos X-Factor. Esto permite que el mismo detector funcione sin problemas en toda la gama de productos DRX, y también que se adapte a su equipamiento actual.

Lleve el detector DRX Plus a donde más lo necesite. Utilice el detector en el DRX-Revolution para rondas matutinas, y luego llévelo a una sala de radiología durante las horas de exámenes de mayor actividad.

El pensamiento X-Factor también permite convertir, sustituir o ampliar sus sistemas actuales de manera fácil y económica.





MÁXIMA MOVILIDAD.

¿Pasillos concurridos? ¿Elevadores llenos? ¿Salas de pacientes pequeñas y desordenadas?

El DRX-Revolution no tiene igual. El sistema es tan compacto y maniobrable que puede moverse sin esfuerzo, incluso puede girarse a 360 grados con tan solo una mano.


Además, esta maravilla de bajo perfil ofrece a los técnicos una vista sin obstrucciones, gracias a que cuenta con la primera columna automática plegable en la industria. Llegarán a donde se les necesita de forma más rápida y más segura.



RESULTADOS MEJORES EMPIEZAN CON IMÁGENES MEJORES.

Al final del día, lo que importan son las imágenes. El grado de claridad y resolución en un rayo X pueden afectar directamente el éxito del resultado del paciente. Puede confiar en que el DRX-Revolution entregará la calidad de imagen que solo la tecnología digital Carestream puede ofrecer.



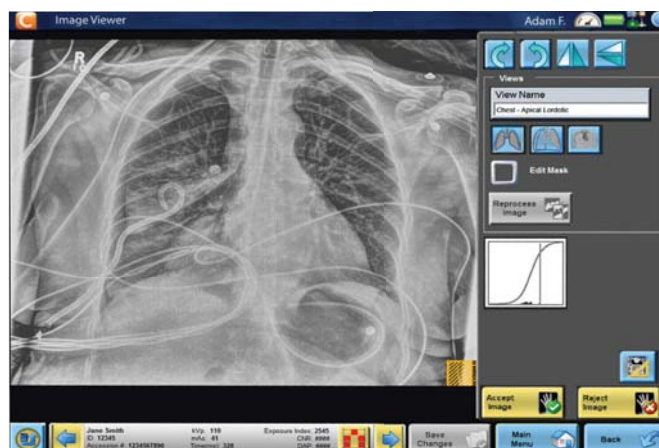

IMÁGENES OPTIMIZADAS.

El DRX-Revolution tiene un sistema único de alineación de tubo y rejilla que ofrece una calidad superior de rayos X y fomenta el uso de la rejilla. Un generador potente de 32 kW, un tubo de enfoque doble y el procesamiento de imágenes EVP Plus se combinan para optimizar aún más las imágenes. Esto significa menos tomas adicionales y mayor soporte para un diagnóstico más rápido y preciso.

El detector DRX-Revolution también ofrece revisión previa de imágenes que incluye un historial de exposiciones y técnicas, con su función de consulta/recuperación basada en el sistema PACS.

Características personalizadas para UCI e imágenes pediátricas

Usted puede mejorar su sistema con un paquete especializado para UCI que incluye la capacidad de visualización de líneas y tubos. Esta característica brinda una imagen complementaria que se mejora para lograr una visualización clara de tubo y líneas PICC que permite verificar un posicionamiento correcto.

El Paquete pediátrico usa un procesamiento de imágenes específico para vistas pediátricas. Está diseñado para optimizar la calidad de la imagen utilizando la adquisición pediátrica específica y parámetros de procesamiento que suprimen el ruido y mejoran el detalle según el tamaño del paciente.

Su elección en detectores DRX

El detector DRX Plus 3543, que es incluso más rápido, ligero y confiable que nuestro modelo anterior, usa un centellador de gadolinio (GOS) para obtener imágenes radiográficas en general.

El detector DRX Plus 3543C utiliza un centellador de cesio (CsI) para aplicaciones sensibles a la dosis como en pediatría, con un mayor DQE y MTF.

El detector DRX 2530C ofrece un diseño de menores dimensiones, óptimo para la obtención de imágenes pediátricas, al ofrecer un posicionamiento rápido y fácil en bandejas de incubadora. El 2530C también es ideal para imágenes ortopédicas.



SABEMOS QUE NO ES FÁCIL.

Además comprendemos los desafíos y cambios que afronta actualmente al brindar servicios de atención médica de calidad. La demanda crece, pero los presupuestos restringidos limitan la contratación y las compras de equipos de capital. Mientras tanto, las reglamentaciones son cada vez más estrictas y los reembolsos son menores.

Claramente, necesita obtener la máxima eficiencia y valor de cada persona, proceso y equipo en la empresa.





MOVILICE SU PRODUCTIVIDAD.


El DRX-Revolution mejorará su flujo de trabajo y aumentará su productividad. Comienza con un simple y único deslizamiento de una tarjeta y sus técnicos estarán listos para trabajar. Una GUI intuitiva facilita la operación. Además, un largo alcance del cabezal del tubo, desde el centro del carrito hasta el eje del haz de rayos X, permite un mejor acceso al paciente y un posicionamiento más preciso, incluso en salas llenas de pacientes.

Sus dos pantallas táctiles permiten rápidas revisiones de las imágenes o cambios técnicos desde la consola o el tubo. El sistema "sostiene" el detector para un embalaje sencillo. Además, esta "sala de rayos X sobre ruedas" ofrece contenedores para guantes, baterías adicionales, marcadores, bolsas y almacenamiento con llave para el detector.





NO IMPORTA EN QUÉ CAMINO SE ENCUENTRE,
LO LLEVAMOS A DONDE
TENGA QUE LLEGAR.

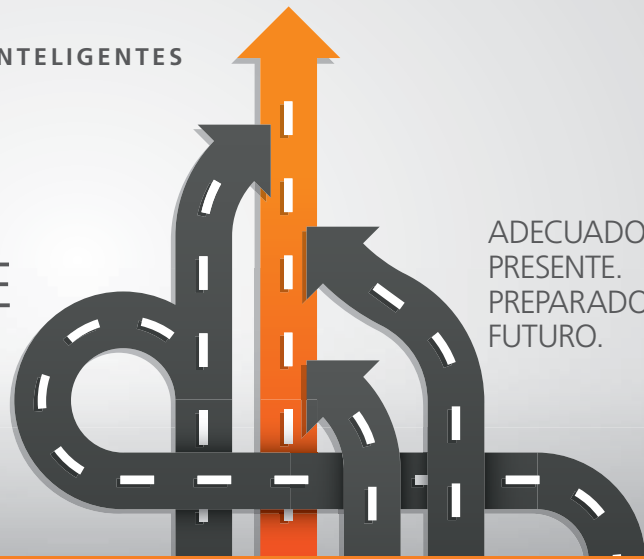

ADECUADOS PARA EL
PRESENTE.
PREPARADOS PARA EL
FUTURO.

Adecuados para el presente. Preparados para el futuro.

Carestream está listo para ayudarlo a planificar el camino más eficaz a su futuro radiográfico. El diseño escalable de nuestros equipos y los componentes modulares se traducen en un alto rendimiento en el presente y actualizaciones fáciles y accesible para los próximos años.

Planifiquemos juntos la migración de sus equipos. Tendrá la confianza de que su inversión actual en tecnología redundará en dividendos también en el futuro.

Una comunidad de servicio y soporte

Para un servicio confiable, consulte a nuestra Red de clientes de éxito. Trabajamos continuamente para mejorar su rendimiento en la obtención de imágenes, lo ayudamos a innovar a medida que cambian sus necesidades y optimizamos al máximo su presupuesto y sus recursos. La red para el éxito de los clientes de Carestream lo rodea con un equipo dinámico de expertos, con un único punto de entrada para acceder de manera sencilla y personalizada a la persona indicada para cada situación. Tanto usted como sus pacientes obtendrán los beneficios de la experiencia y de las mejores prácticas que solamente Carestream puede ofrecer, basándose en miles de servicios a clientes en todo el mundo y en nuestros 100 años de experiencia en innovación en el tratamiento con imágenes médicas.



carestream.com/drx-revolution

