

IMAGE SUITE ANCORA PIÙ ATTRAENTE.

Il Software Image Suite V4 ha stabilito un nuovo termine di confronto per l'efficienza del workflow nelle strutture di dimensioni contenute. Questo software è caratterizzato da un'interfaccia di tipo "touch" di facile utilizzo, ancora più facile che mai in precedenza. Una serie di strumenti perfezionati, un workflow lineare e una qualità d'immagine migliorata sono solo alcuni degli elementi offerti da questa soluzione di prossima generazione. Inoltre, è possibile integrarlo con l'avanzato modulo opzionale "Mini-PACS", che permette una gestione e una analisi eccellente delle immagini. Le immagini di alta qualità che vi occorrono, con un sistema che costituisce una risposta perfetta – a un prezzo molto conveniente.



**INTUITIVO.
FLESSIBILE.**

IMAGE SUITE FORNISCE I BENEFICI CHE VI OCCORRONO.

Conveniente

Image Suite è pensato per risparmiare denaro negli Ambulatori privati e nelle Cliniche di dimensioni contenute – e ora, con il modulo Mini-PACS completamente opzionale, è possibile decidere di aggiungere questa funzionalità nel momento in cui ne avrete bisogno.

Facile da utilizzare

L'interfaccia utente di prossima generazione rende il funzionamento più intuitivo che mai. La brevità della fase di apprendimento significa che i vostri Tecnici saranno immediatamente in grado di acquisire, elaborare, modificare e archiviare le immagini come degli utenti già esperti. L'efficienza e la produttività aumenteranno nettamente.


Potente

Questo piccolo e potente gioiello fornisce un'elaborazione d'immagine automatica e affidabile, strumenti avanzati di trattamento e di misurazione e funzionalità per l'analisi delle immagini rifiutate. L'inserimento delle richieste da remoto e l'accesso PACS / refertazione a distanza offrono la flessibilità di un utilizzo nella vostra intera struttura.

Flessibile

Il sistema può essere personalizzato facilmente per rispondere a vostre esigenze aziendali specifiche. Acquistate le funzionalità che vi occorrono adesso; in futuro aggiungerete altre funzionalità di pari passo con lo sviluppo della vostra struttura.

UN INSIEME PERFETTO – SOFTWARE + DR SYSTEM + STAMPANTI

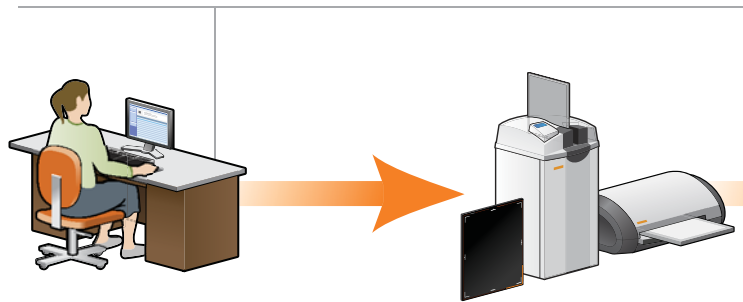

PRENOTAZIONE

ACQUISIZIONE

PRENOTAZIONE

Accelerazione dell'accettazione, da qualsiasi luogo

- Accettazione dei pazienti a distanza mediante software Web-based
- La grafica di selezione permette una scelta rapida e facile delle parti anatomiche e delle proiezioni
- Aggiunta di nuove parti anatomiche e proiezioni, modifica delle esistenti e applicazione di elaborazioni personalizzate
- Collegamento a sistemi EMR/RIS conformi a DICOM o a HL7 semplificando il workflow

ACQUISIZIONE

Acquisizione rapida e facile di immagini di alta qualità combinando Image Suite con i Carestream CR e DR System

- In grado di acquisire immagini da due DRX-1 System, wireless o con filo, e da sistemi Vita e Classic CR System
- L'interfaccia utente di tipo "touch" di facile utilizzo permette una navigazione semplice e più gradita all'utente
- Uniforme ed elevata qualità d'immagine con l'elaborazione d'immagine automatica Enhanced Visualization (EVP+)
- Strumenti clinici e applicazioni che includono: maschera circolare, istogramma, analisi, valore pixel ROI e altro ancora
- Miglioramento della qualità d'immagine e accelerazione del workflow, utilizzando immagini di riferimento per il posizionamento e guide con immagini radiografiche campione
- Esecuzione di esami mammografici con Sistemi Classic CR
 - Utilizzo della funzionalità immagini rifiutate, per monitorare eventuali problemi
 - Capacità di acquisire automaticamente le informazioni sul DAP e sulla tecnica espositiva, eliminando la necessità di un inserimento manuale



Detettori DRX

SOFTWARE CARESTREAM IMAGE SUITE + CR + LASER



VISUALIZZAZIONE / MODIFICA

Ottenere immagini di alta qualità

- Miglioramento del workflow e della produttività grazie alla schermata di acquisizione, semplice e di facile utilizzo, di Image Suite
- Con un clic su un pulsante, dalla schermata di acquisizione si regola in modo fine l'elaborazione d'immagine, con semplici barre a scorrimento per la luminosità, il contrasto e il livello di dettaglio
- Incremento della produttività, utilizzando fino a otto sessioni concorrenti del visualizzatore Web
- Strumenti specializzati per Chiropratica, Ortopedia e Mammografia
- L'editor automatico e l'editor manuale di stitching permettono di manipolare e unire le singole immagini creando precisamente l'immagine "long length" desiderata, per i segmenti lunghi
- Accesso, ovunque, su iPad alle immagini del paziente e al referto mediante il Visualizzatore Tablet

DIAGNOSI / REFERTAZIONE

Velocizzare le diagnosi, migliorare i servizi al paziente

- Impulso alla produttività visualizzando simultaneamente immagini multiple sui client Web via supporto per doppio monitor
- Ricezione di immagini TC, RM, Ecografiche e da CR / DR aggiuntive, mediante il software opzionale SCP DICOM Store
- Generazione / verifica di referti su client Web multipli nella vostra intera struttura
- Esecuzione di test di qualità del sistema mediante il software Total Quality Tool di Image Suite
- Mediante il software OmniLink, trasferimento sicuro di immagini DICOM su Internet, senza la necessità di VPN o di connessioni con tunnel cifrato - ideale per applicazioni mobili

STAMPA / ARCHIVIAZIONE

Condividere e archiviare le immagini in modo efficiente

- Massima sicurezza con backup on-demand oppure pianificati
- Esecuzione di backup su CD e su dispositivi USB rimovibili per l'archiviazione offline
- Ottimizzazione dell'utilizzabilità delle immagini con strumenti per esportazione JPEG e DICOM
- Supporto per la composizione multiformato per la stampa, con funzionalità indipendenti di modifica delle immagini



Vita CR




Stampante DRYVIEW 5700

LA SOLUZIONE IMAGE SUITE.

Un sistema completo di
acquisizione di immagini
digitali e di gestione.

Classic CR

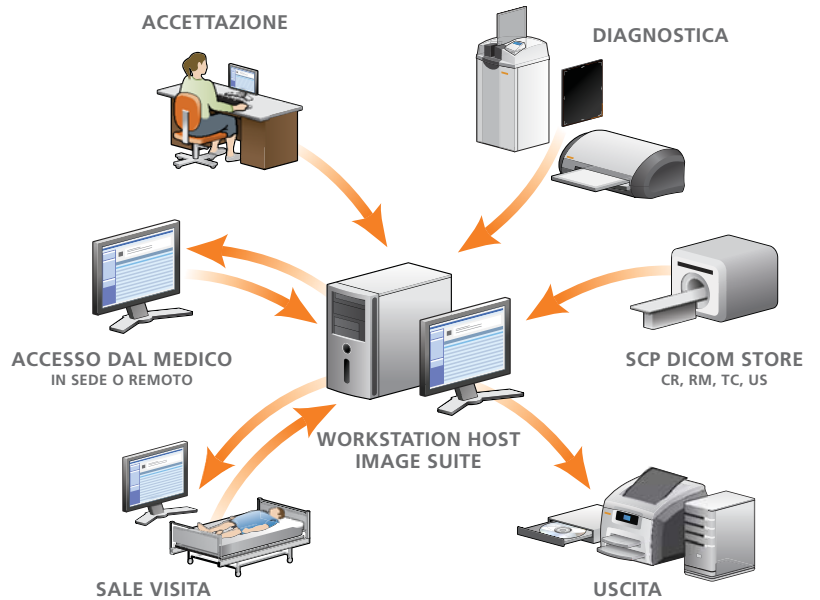

Opzioni disponibili per il Software Image Suite / V4

- Software Clinical Report per refertazione
- Software Archiviazione Mini-PACS
- Licenze per Visualizzatore Web - fino a 8
- Cassette / stativi a parete per Long-length Imaging
- Service Class Provider (SCP) DICOM Store
- Oggetto test TQT
- Strumenti di misurazione avanzati
- Software Mammography Feature
- Licenza per incremento spazio di memoria di acquisizione
- Licenza per Istanza Multipla Appuntamenti Web
- OmniLink a pacchetto
- Software Visualizzatore Tablet

Una comunità per l'assistenza tecnica e il supporto

Beneficiate di tutti i vantaggi del nostro Customer Success Network. Lavoriamo continuamente per migliorare le vostre performance di imaging, aiutandovi a innovare di pari passo con l'evoluzione delle esigenze e a ricavare il massimo dal vostro budget e dalle vostre risorse. Il Carestream Customer Success Network opera per voi con un dinamico team di esperti attraverso un Punto Unico di Accesso, che permette di mettersi in contatto in modo facile e personalizzato con le persone giuste in ogni situazione. Voi e i vostri pazienti beneficerete dell'esperienza, delle conoscenze e delle pratiche migliori che solo Carestream è in grado di fornire, fondate su migliaia di precedenti con clienti in tutto il mondo e su 100 anni di attività nell'innovazione per l'imaging medicale.



www.carestream.it

