

# OPROGRAMOWANIE IMAGE SUITE STAŁO SIĘ JESZCZE LEPSZE.

Oprogramowanie Image Suite V4 dostarczyło nowego wzorca wydajności pracy w mniejszych placówkach. To solidne oprogramowanie posiada łatwy w użyciu, dotykowy interfejs, który jest jeszcze łatwiejszy w obsłudze. Ulepszony zestaw narzędzi, usprawniona organizacja pracy i wyższa jakość obrazu to tylko niektóre zalety, jakie oferuje to rozwiązanie nowej generacji. Nasz zaawansowany moduł mini-PACS umożliwia wyjątkowe zarządzanie i analizę obrazu i jest teraz całkowicie opcjonalny. Zyskaj wysokiej jakości obrazy, jakich potrzebujesz, dzięki systemowi, który idealnie odpowiada Twoim potrzebom – w bardzo przystępnej cenie.



**INTUICYJNE.  
ELASTYCZNE.**

# IMAGE SUITE POSIADA ZALETY, KTÓRYCH POTRZEBUJESZ.

## Niedrogie

Oprogramowanie Image Suite zapewnia oszczędności w gabinetach prywatnych i mniejszych klinikach – a teraz, kiedy moduł mini-PACS jest całkowicie opcjonalny, możesz zdecydować o dodaniu tej funkcji wtedy, kiedy będziesz jej potrzebował.

## Prosty w obsłudze

Nasz interfejs użytkownika nowej generacji sprawia, że obsługa jest bardziej intuicyjna niż kiedykolwiek. Łatwa obsługa sprawia, że technolodzy błyskawicznie będą wykonywać, obrabiać, edytować i przechowywać obrazy jak profesjonaliści. Obserwuj szybujące słupki wydajności.

## Potężne

Ten mały trybik w systemie dostarcza niezawodnej, automatycznej obróbki obrazu, zaawansowanych narzędzi do edycji i narzędzi pomiarowych, a także funkcji analizy obrazów odrzuconych. Zdalne wprowadzanie zlecenia i dostęp/raportowanie PACS zapewniają elastyczność wykorzystania przepustowości systemu w placówce.


## Elastyczny

System daje się łatwo dopasować do ściśle określonych potrzeb biznesowych. Uzyskaj korzyści, których potrzebujesz, już teraz, i dodaj niezbędne funkcje później, gdy będziesz rozwijać swoją działalność.



Detektory DRX

# DOSKONALI PARTNERZY FIRMY CARESTREAM +

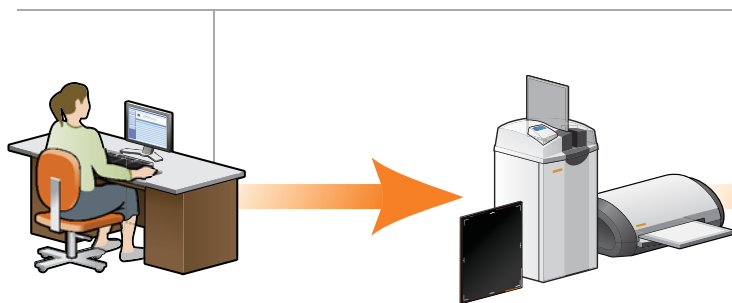

## HARMONOGRAM

## AKWIZYCJA

### HARMONOGRAM

#### Przyspiesz proces rejestracji - skądkolwiek

- Rejestruj pacjentów zdalnie, korzystając z oprogramowania dostępnego w sieci
- Grafiki umożliwiają szybkie i łatwe wybieranie części ciała i widoków
- Dodawaj nowe części ciała i widoki, edytuj istniejące i zastosuj obróbkę niestandardową
- Aby uprościć organizację pracy, połącz z systemami EMR/RIS zgodnymi z DICOM lub HL7

### AKWIZYCJA

#### Szybko i łatwo wykonuj wysokiej jakości zdjęcia, łącząc oprogramowanie Image Suite z systemami CR i DR firmy Carestream

- Możliwość akwizycji obrazów z maksymalnie dwóch bezprzewodowych lub przewodowych systemów DRX-1, a także systemów Vita i Classic CR
- Dotykowy interfejs użytkownika umożliwia prostą nawigację i zapewnia przyjemność obsługi urządzenia
- Polegaj na stałej jakości obrazu dzięki obróbce obrazu za pomocą opcji Enhanced Visualization – Automatic Image Processing (EVP+)
- Narzędzia i aplikacje kliniczne, w tym maskowanie kołowe, histogram, analiza, wartość piksela ROI, itd.
- Popraw jakość obrazu i przyspiesz pracę dzięki obrazom referencyjnym dotyczącym pozycjonowania i przewodnikom zawierającym przykładowe obrazy RTG
- Wykonuj badania mammograficzne za pomocą systemu DIRECTVIEW Classic CR\*
- Użyj funkcji analizy obrazów odrzuconych, aby śledzić problemy dotyczące badań
- Możliwość automatycznej akwizycji DAP i technika eliminująca konieczność wprowadzania ręcznego

# Y – OPROGRAMOWANIE IMAGE SUITE SYSTEMY CR + DR + DRUKARKI LASEROWE



## PRZEGLĄDANIE/EDYCJA

### Uzyskaj obrazy wysokiej jakości

- Popraw organizację pracy i zwiększ wydajność dzięki prostemu, łatwemu w użyciu ekranowi akwizycji obrazu w oprogramowaniu Image Suite
- Szczegółowa obróbka obrazu jednym kliknięciem przycisku za pomocą suwaków do dopasowywania jasności, kontrastu i szczegółów na ekranie akwizycji
- Używaj do ośmiu jednoczesnych sesji przeglądarki sieciowej, aby zwiększyć wydajność
- Używaj specjalistycznych narzędzi pomiarowych do badań chiropraktycznych, ortopedycznych lub mammograficznych†
- Pracuj z poszczególnymi obrazami i sklejaj je, aby utworzyć dokładne taki widok, jakiego potrzebujesz, dzięki edytorom łączenia automatycznego i ręcznego
- Zyskaj dostęp do obrazów pacjenta i raportów w dowolnym miejscu dzięki aplikacji Tablet Viewer na urządzeniu iPad\*

## DIAGNOZA/RAPORT

### Przyspiesz diagnozowanie, ulepsz opiekę nad pacjentem

- Zwiększ wydajność, przeglądając wiele obrazów jednocześnie dzięki obsłudze dwóch monitorów na klientach sieciowych
- Odbieraj obrazy z systemów CT, MR, USG i dodatkowych CR/DR z opcjonalnym oprogramowaniem DICOM store SCP
- Generuj/przeglądaj raporty na wielu komputerach w sieci w Twojej placówce
- Wykonuj testy jakości systemu za pomocą narzędzia Total Quality Tool w oprogramowaniu Image Suite
- Bezpiecznie przesyłaj obrazy DICOM przez Internet bez konieczności korzystania z sieci VPN lub połączeń kodowanych dzięki oprogramowaniu OmniLink - idealnemu do zastosowań mobilnych

## DRUKOWANIE/ARCHIWIZACJA

### Skutecznie udostępniaj i przechowuj obrazy

- Zmaksymalizuj bezpieczeństwo dzięki wykonywaniu kopii zapasowych regularnie lub na żądanie
- Zapisuj kopie zapasowe na płytach CD i w pamięciach przenośnych USB, aby przechowywać dane offline
- Zoptymalizuj wykorzystanie obrazów za pomocą narzędzi do eksportu do formatu JPEG lub DICOM
- Wspomagaj wieloformatowe składy druku z możliwością niezależnej edycji zdjęć



DIRECTVIEW Vita CR



Drukarka laserowa DRYVIEW 5700


\* Niedostępne w USA

† Specjalistyczne narzędzia do mammografii nie są dostępne w USA.

# OPROGRAMOWANIE DO OBRÓBKİ ZDJĘĆ.

Kompletne rozwiązanie do akwizycji obrazów cyfrowych i zarządzania nimi.

DIRECTVIEW  
Classic CR

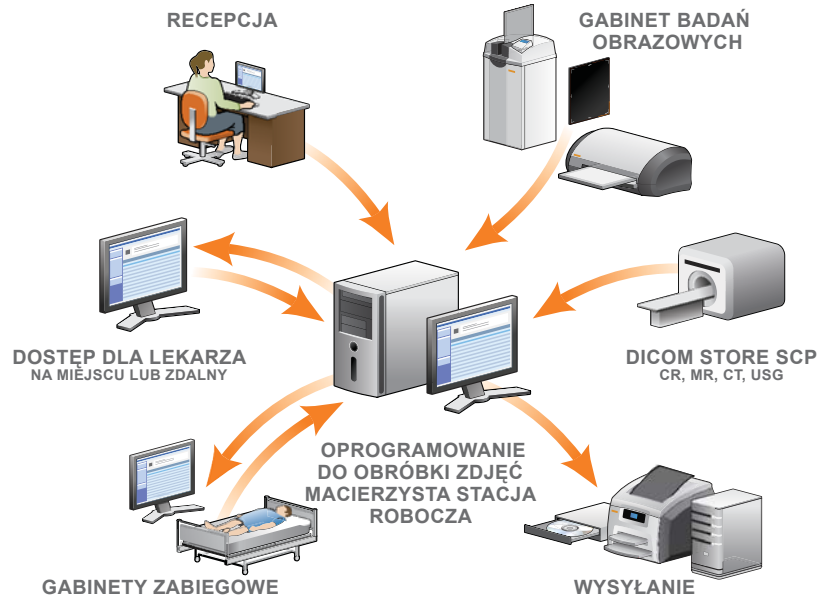

## Dostępne opcje oprogramowania Image Suite/V4

- Oprogramowanie do raportów klinicznych
- Oprogramowanie do archiwizacji mini-PACS
- Licencje przeglądarki sieciowej – do 8
- Kasety/statywy do obrazowania pełnej długości
- DICOM Store Service Class Provider (SCP)
- TQT Phantom
- Zaawansowane narzędzia pomiarowe
- Oprogramowanie‡ Mammography Feature
- Licencja na powiększoną wielkość miejsca przechowywania akwizycji
- Licencja na wiele instancji Web Appointment
- Pakiet OmniLink
- Oprogramowanie Tablet Viewer\*

## Spółeczność obsługi i wsparcia technicznego.

Czerp korzyści ze wszystkich zalet naszej sieci pozyskanych klientów. Stale pracujemy, aby dostarczyć doskonałej wydajności obrazowania, oferować Ci innowacje w miarę zmieniających się potrzeb i pomóc Ci czerpać jak najwięcej z Twojego budżetu i zasobów. Sieć pozyskanych klientów firmy Carestream otacza klienta dynamicznym zespołem wyjątkowych ekspertów. Jeden punkt kontaktowy oznacza łatwy, dopasowany do potrzeb dostęp do właściwych ludzi w każdej sytuacji. Zarówno Ty, jak i Twój pacjent będziecie czerpać korzyści z zalet i najlepszych praktyk, jakich może dostarczyć wyłącznie firma Carestream, dzięki tysiącom zaangażowanych klientów na całym świecie i naszemu 100-letniemu doświadczeniu w innowacjach w dziedzinie obrazowania medycznego.



[www.carestream.com](http://www.carestream.com)



© Carestream Health, 2013. CARESTREAM, DIRECTVIEW i DRYVIEW są znakami handlowymi firmy Carestream Health. NR KAT. 200 0102\_PL 12/13

\* Niedostępne w USA

‡ Specjalistyczne narzędzia do mammografii nie są dostępne w USA.

# Carestream